


Brukerveiledning KRYO Skintagfjerner

– Kun til utvortes bruk – Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet –
– Skintags behandles med kryoterapi, som vil si at utveksten fryses –


1 INNHOLD

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Innhold. Norgesplaster Kryo Skintagfjerner | 5. Mulige bivirkninger |
| 2. Hva er skintags? | 6. Kontraindikasjoner |
| 3. Bruksanvisning | 7. Advarsler og forsiktighetsregler |
| 4. Etter behandlingen | |

1 INNHOLD, NORGESPLASTER KRYO SKINTAGFJERNER

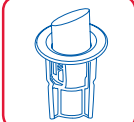- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 1 Aerosoldispenser med hette, 38 ml dimetyleter |
|  | 1 Bruksanvisning |
| | 8 Beskyttende plaster |
| | 8 Skumtupper i holder – til engangsbruk |

2 DIAGNOSTISERE SKINTAGS

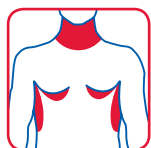

Skintags kalles også akrokordoner eller hudfliker og oppstår ofte både hos menn og kvinner. Skintags er ufarlige og ikke smittsomme. De kan oppstå spontant, vanligvis i armhulen, under brystene i nakke- og halsområdet.

En skintag har følgende egenskaper:



- hudfarget
- myk
- kan beveges
- uten smerter
- stikker ut
- har en liten stilk

FORSIKTIGHETSREGLER!

I de fleste tilfeller er én enkelt behandling tilstrekkelig til å fjerne skintagen. Har du fremdeles skintagen etter to (2) uker, gjentar du behandlingen. Ikke behandle skintagen mer enn 2 ganger med et behandlingsintervall på 2 uker. Hvis dette behandlingsregimet ikke har ønsket utfall, må du rådføre deg med lege. Ved flere skintags som sitter tett sammen i det behandlede området, må hver skintag behandles separat med et intervall på minst 1 dag mellom behandlingen.

3. BRUKSANVISNING

Ikke prøv å skille korken fra dispensereren/holderen. Disse er festet sammen.



1 Legg et plaster rundt skintagen som skal behandles.



4 Hold skumtuppen mot skintagen i 40 sekunder.



2 Plasser en skumtuppholder i åpningen på applikatorhetten. Press holderen forsiktig inn i åpningen. Hold dispensereren opp-ned med holderen/skumtuppen ned. Ikke sett skumtuppen på skintagen.



5 Fjern plasteret etter behandlingen.



3 Når dispensereren aktiveres, slik at innholdet kommer ut på skumtuppen, holder du produktet borte fra kroppen. Ikke rett tuppen mot andre mennesker. Trykk 4 ganger med tommelen mot bunnen av dispensereren for å slippe innholdet ut på skumtuppen. Hold dispensereren opp-ned i 10 sekunder.



6 Fjern skumtuppen fra applikatorhetten ved å trekke den ut av holderen. Kast på egnet måte.

Ved flere skintags i samme behandlingsområde, må du ikke behandle mer enn 2 skintags om gangen. Hvis skintaggene sitter tett sammen må det kun behandles en skintag pr. dag.

Skumtuppene som leveres sammen med produktet, skal ikke brukes flere ganger. De er kun til engangsbruk og skal kastes etter bruk. Bruk en ny skumtupp til hver skintag.

Ikke berør overflaten på den brukte skumtuppen. Hold skumtuppen unna andre hudoverflater. Kontakt med den brukte skumtuppflaten kan føre til at hudflatene fryser.

Brukerveiledning KRYO Skintagfjerner

– Kun til utvortes bruk – Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet –
– Skintags behandles med kryoterapi, som vil si at utveksten fryses –

4. ETTER BEHANDLINGEN

- Du kan føle en svak smerte eller prikking. Dette er en normal bivirkning av kryoterapi.
- Det kan også oppstå blemmer på behandlingsstedet. Ikke behandle eventuelle blemmer.
- Etter behandlingen må du ikke klø eller berøre behandlingsområdet.
- Pass på at behandlingsområdet er rent.
- Svømming og dusjing er tillatt.

5. MULIGE BIVIRKNINGER

Fryseprosessen kan forårsake lyse eller mørke flekker i huden. Dette kalles hypo- eller hyperpigmentering og kan være en av bivirkningene av kryoterapi. Det er høyere risiko for dette ved bruk på kraftig pigmentert hud og/eller hvis man ikke følger bruksanvisningen nøye. Ved bruk som instruert, forsvinner flekkene gradvis. Bruk av produktet på andre måter enn som beskrevet i denne bruksanvisningen, kan føre til termiske reaksjoner, hypo- eller hyperpigmentering, skade av huden og arrdannelse. Rådfør deg med lege ved infeksjoner og/eller komplikasjoner.

6. KONTRAIKASJONER

Norgesplaster Kryo Skintagfjerner skal ikke brukes (er kontraindisert) til følgende:

- Dersom hudkreft er diagnostisert og under behandling av hudkreft.
- Til større skintags enn 4 mm. Store skintags skal ikke behandles med denne metoden.
- Når fargen varierer fra fargen på omkringliggende hud.
- Når skintagen er hårete eller inneholder hår.
- Når den er hard.
- Når den blør.
- Ved irritert, infisert eller sensitiv hud.
- Når det foreligger tvil om dette er en skintag.
- Avvik knyttet til enhver type kjent hudlidelse.
- Ved sensibilisering eller allergi overfor ekstrem kulde (urtikaria av kuldetype).
- Ved diabetes og hos personer med sirkulasjonsproblemer.
- I eller omkring ansiktet.
- Til vorter rundt kjønnsorganene/endetarmen.
- Til barn under 4 år.
- Ved kraftig pigmentert hud.
- I kombinasjon med andre legemidler.

7. ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke innånd aerosoler.
- Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde.
- Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
- Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.

Om du ønsker å bruke Norgesplaster Kryo Skintagfjerner mens du er gravid eller ammer, må du rådføre deg med lege først. Rådfør deg med lege dersom du er i tvil!

REKLAMASJONER OG KUNDESERVICE:

Kontakt produsenten eller leverandøren ved eventuelle spørsmål eller rapportering om bivirkninger. Reklamasjoner og spørsmål kan også sendes inn på e-post til info@norgesplaster.no



Produsert av
Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega, Nederland



Distribuert og markedsført av

Norgesplaster AS
Granlivenge 21, 4702 Vennesla, Norway
info@norgesplaster.no
www.norgesplaster.no
Telefon 38152200



0344